



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**CARRELLO EXCEL
EXCEL TROLLEY
CHARIOT EXCEL
CARRO EXCEL
CARRINHO EXCEL
WAGEN "EXCEL"
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ EXCEL**

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso
Guia para utilização - Gebrauchs ungsanleitung - Οδηγίες χρήσης

REF 27440 - 27441

Distribuito da / distributed by / distribué par / distribuido por
/ vertrieben von / distribuído por / Διανέμεται από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Italy



INTRODUCTION

Il est conseillé de lire attentivement le manuel suivant avant d'utiliser l'équipement.

DESCRIPTION

Cet article est un chariot fabriqué en acier peint à 3 ou 4 étagères fixes. Il s'agit d'un chariot de service destiné à l'usage hospitalier. Le chariot de soins médicaux Excel est un chariot très pratique indiqué pour le rangement et/ou le transport de petits appareils médicaux.

COMPOSANTS

- 3 étagères code 27440
- 4 étagères code 27441
- 2 pieds

Sachet avec matériau de montage:

- 4 roues



- 12 vis TTBE 8 X 25 code 27440
- 16 vis TTBE 8 x 25 code 27441
- 12 rondelles 8 X 16 code 27440
- 16 rondelles 8 X 16 code 27441
- 12 vis TT 8 X 16 FE code 27440
- 16 vis TT 8 X 16 FE code 27441
- 2 CLÉS ALLEN





INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Commencez la phase de montage en aménageant un plan de travail horizontal stable.

Vissez les roues à la base des deux pieds.

Pour fixer les étagères à la structure commencez par un côté et prenez les vis de fixation.
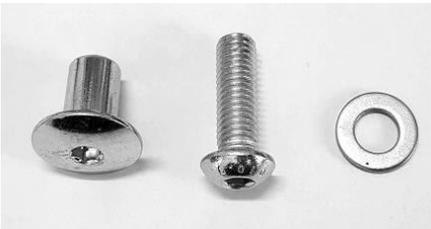
| Visserie de fixation | Vis et rondelle à insérer dans l'étagère | Vis TT à insérer dans la structure sur le côté extérieur du pied |
|---|---|---|
|  |  |  |

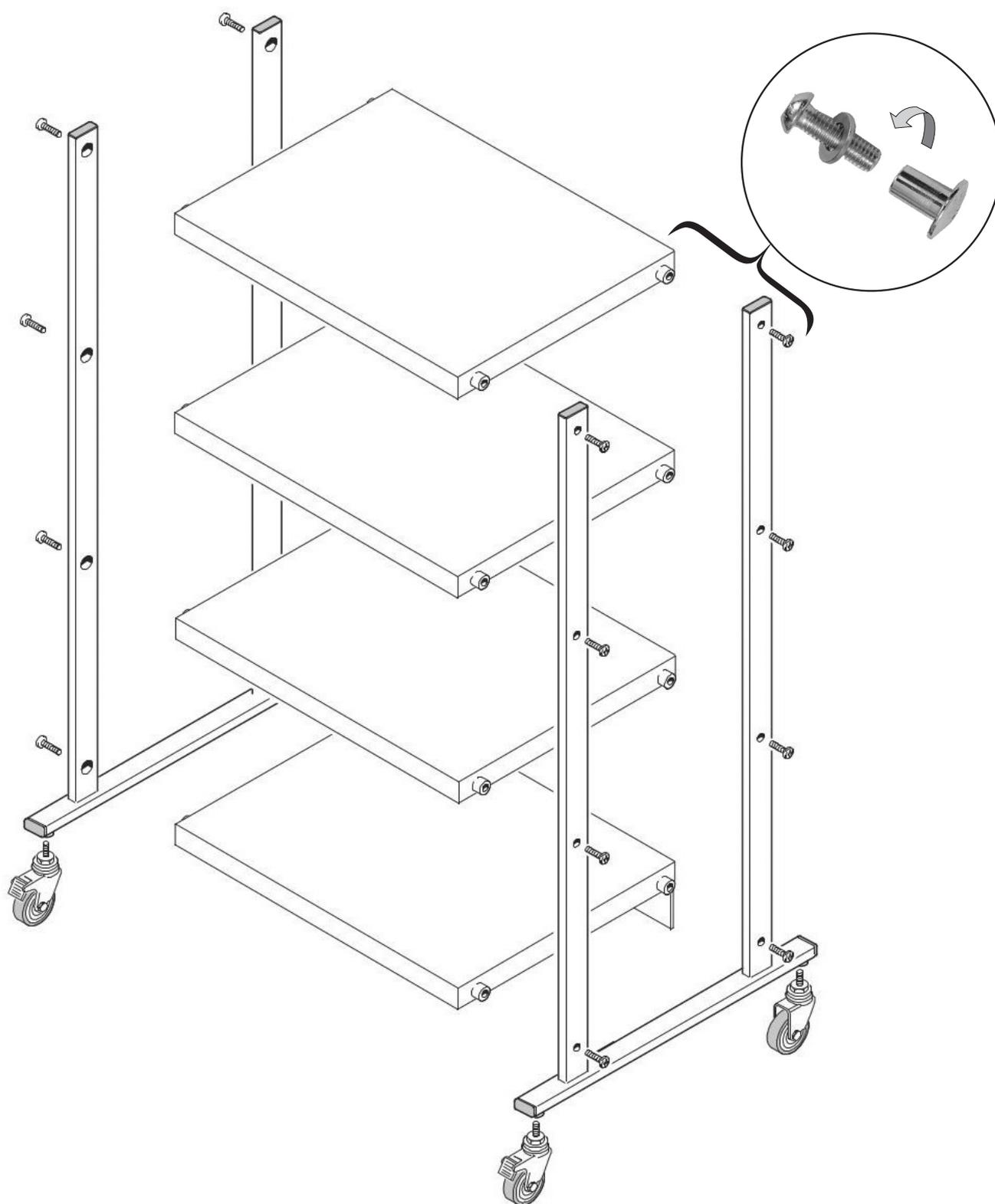

FICHE TECHNIQUE

| | |
|------------------------------------|--|
| Dimensions | Chariot à 3 étagères : 66 x 68 x h 81 cm Chariot 4 étagères : 66 x 68 x h 111 cm Étagère : 60 x 45 x h 2,5 cm Boîte : 96,5 x 18,5 x h 74 cm |
| Poids | Chariot à 3 étagères : 27 kg (28,8 kg avec boîte) Chariot à 4 étagères : 35,5 kg (37,3 kg avec boîte) |
| Capacité de charge maximale | 80 kg |



AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION

- Vérifiez que les écrous de blocage sont serrés.
- Respecter la capacité de charge maximale indiquée dans les fiches techniques.
- Éviter le contact direct avec des blessures ouvertes.
- Ne convient pas pour une utilisation en plein air.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
- Contrôlez périodiquement tous les points de fixation.
- Pour le garder au mieux, il est conseillé d'éviter toute exposition prolongée au soleil ; le contact avec des milieux salins et l'entrepose dans des environnements très humides.
- Lavez les surfaces en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse et utilisez des désinfectants spéciaux.
- Rincez avec un chiffon humide et séchez soigneusement.
- Ne versez pas sur les surfaces des détergents à base de chlore ou d'ammoniac, de substances grasses et huileuses.
- N'utilisez pas d'outils contenant du fer pour le nettoyage. Si une désinfection s'avère nécessaire, utiliser uniquement des produits adaptés non corrosifs.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.